


# CATCHER

## Fangkatheter

## Forceps catheter

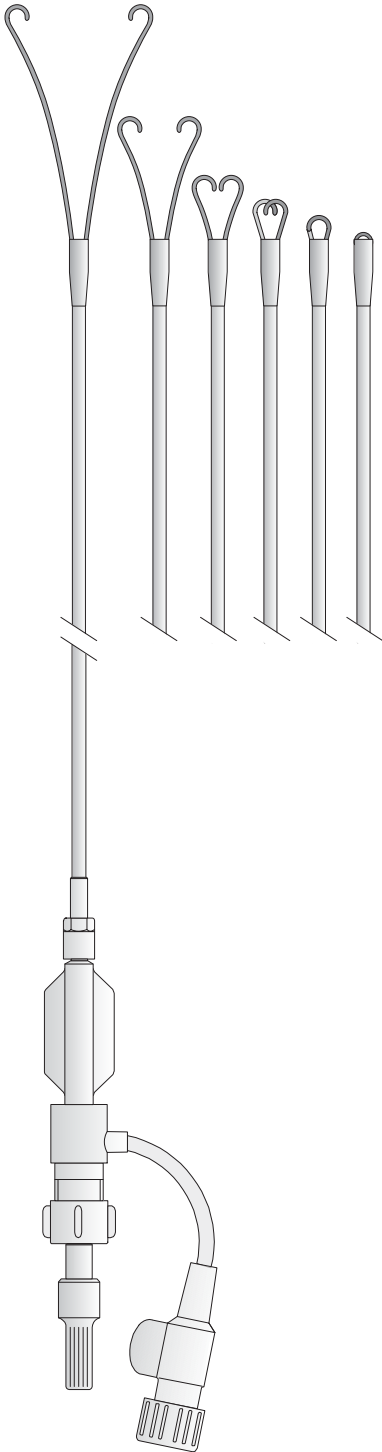

### Artikelbeschreibung

**CATCHER** ist ein Fangkatheter zum Einfangen und Entfernen von Fremdkörpern.  
 Die CATCHER Fangarme sind aus medizinischem Edelstahl gefertigt.  
 Durch Vorschub des zentralen Stilets werden die Fangarme des CATCHER ausgefahren.  
 Die CATCHER Fangarme können vollständig an den Katheter zurückgezogen werden, so daß die Gefäße beim Einführen des Katheters nicht verletzt werden.

Typ: ..... **CATCHER**  
 Katheter Länge ..... 110 cm

### Product Description

**CATCHER** is a forceps catheter to catch and retrieve foreign bodies.  
 The CATCHER's tentacles are made out of medical grade stainless steel.  
 By pushing the central stylet, the tentacles of CATCHER are extended.  
 The CATCHER tentacles can be retracted close to the catheter to prevent injury during insertion.

Type: ..... **CATCHER**  
 Catheter Length ..... 110 cm

### Artikelbezeichnung Product name

**CATCHER**

Empfohlene Schleuse  
Recommended Introducer  
5 F

Katheter Länge  
Catheter Length  
110 cm

### Artikel-Nr. Article-no.

07091

### Stück Unit

1

Die Lieferung erfolgt gas-sterilisiert.  
 Für Einmalgebrauch bestimmt!  
 Goods supplied gas-sterilized.  
 For one time use only!

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.  
 The right to make technical improvements without notice is reserved.